

## Инструкция по эксплуатации Smart II (Смарт II)

Благодарим Вас за покупку массажного кресла Смарт II. Перед началом использования кресла обязательно полностью прочтите инструкцию по эксплуатации.

### SMART II

#### Требования по безопасности:

Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем Вы начнете использовать это массажное кресло. Если у Вас одно из ниже названных заболеваний, то проконсультируйтесь у соответствующих врачей прежде, чем начать его использовать.

Если Вы:

- Страдаете заболеваниями сердца;
  - Страдаете остеопорозом;
  - Беременны;
  - Страдаете отсутствием чувствительности;
  - Имеете онкологическое заболевание;
  - В данный момент проходите курс лечения;
  - Страдаете какими-либо физическими недостатками.
- 
- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь к массажным механизмам во время их работы.
  - Не пытайтесь ничего ремонтировать самостоятельно, иначе гарантия не будет действовать;
  - Если при использовании кресла Вы чувствуете себя не комфортно, обратитесь, пожалуйста, к врачу;
  - Во избежание поражения электрическим током, или других ранений, не допускайте безнадзорное использование кресла детям;
  - Не используйте кресло во влажных местах и в местах с высокой температурой;
  - Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров или кабелей, производится представителями сервиса или квалифицированным персоналом;
  - Не тащите кресло по полу и избегайте скручивания деталей или сильных толчков;
  - Не кладите тяжелые предметы на кресло;
  - При длительной паузе в эксплуатации, отключите кресло от питания, для того чтобы избежать опасности электрического удара, короткого замыкания или огня в дальнейшем;
  - Избегайте касания штекера мокрыми руками;
  - Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после еды, может вызвать тошноту и не приятное ощущение;
  - Время массажа не должно превышать рекомендованных 30 минут, во избежание повышенного стимулирования мускулов и нервов.



#### Медицинские показания:

Если специалисты, Ваш врач ортопед не запрещает массаж, то Вы можете без сомнения пользоваться массажным креслом. Интенсивность массажа повышается, если кресло приведено в горизонтальное положение. Рекомендуются начать массаж в сидячем положении. Массаж должен доставлять удовольствие и быть приятным. Чрезмерный массаж может вредить Вашему здоровью. Беременные, больные и дети не должны пользоваться массажным креслом. При нарушениях позвоночника или после операций массаж может быть опасен. При любых сомнениях обращайтесь сначала за советом к Вашему врачу.



#### Уход

Вы приобрели продукт, состоящий из высококачественных материалов, что требует соответствующего ухода. Избегайте непосредственного солнечного влияния и влажности на кресло. Советуем производить регулярный уход за массажным креслом не спиртосодержащими средствами.

#### Начало эксплуатации

Проверьте перед вводом в эксплуатацию правильное напряжение сети. Соедините кабель питания со спинкой кресла и только потом поместите штекер в розетку питания. При правильно включенном массажном кресле, пульт дистанционного управления должен светиться.



#### Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 Вольт; Мощность: 120 Вт; Частота: 50 Гц;

Длина: 114, Ширина: 85, Высота: 75,5 см

В разложенном состоянии: 130 см

Максимальный наклон спинки: 175°

Вес: 53 кг

#### Время работы:

Автоматический режим: 20 минут


Ручной: 30 минут

#### Подставка для ног

Длина: 45, Ширина: 30, Высота: 63 см

Вес: 10 кг



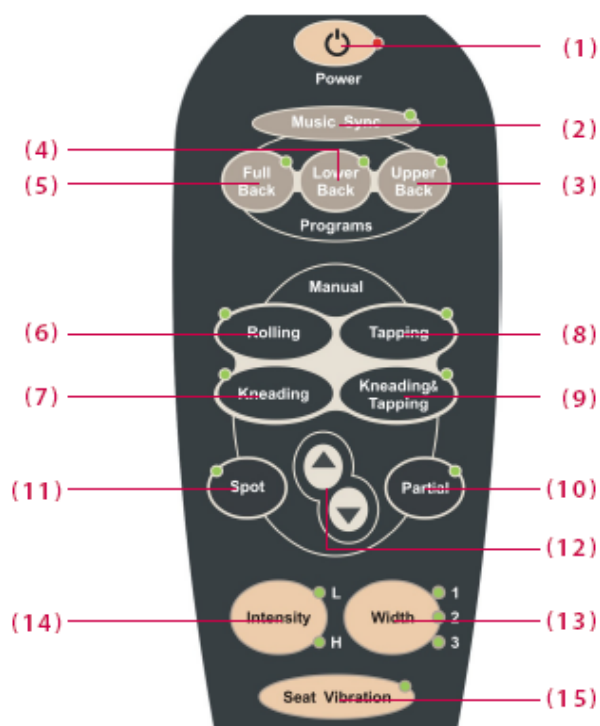

- (1)** Вкл. /выкл. функционирования кресла (ON/OFF)
- (2)** Синхронизация массажа с музыкой (Music Sync)
- (3)** Массаж верхней части спины (Upper Back ON/OFF)  
При нажатии данной кнопки массаж будет производиться в верхней части спины
- (4)** Массаж нижней части спины (Lower Back ON/OFF)  
При нажатии данной кнопки массаж будет производиться в нижней части спины
- (5)** Массаж всей спины (Full Back ON/OFF)  
При нажатии данной кнопки массируются все части спины
- (6)** Роликовый массаж (Rolling ON/OFF)  
Включение и выключение роликового массажа  
»Часть тела« (10) и »Ширина« (13)
- (7)** Растирающий массаж (Kneading ON/OFF)  
Включение и выключение растирающего массажа  
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) и »Часть тела« (10)
- (8)** Поколачивающий массаж (Tapping ON/OFF)  
Включение и выключение поколачивающего массажа  
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) и »Часть тела« (10)
- (9)** Растирающий и поколачивающий массаж (Kneading & Tapping ON/OFF)  
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) »Часть тела« (10) и »Ширина« (13)
- (10)** Массаж отдельной части тела (Partial ON/OFF)



- (11) Массаж отдельной части тела (Spot ON/OFF)
- (12) Управление роликами Вверх/вниз
- (13) Управление шириной роликов (Width)
- (14) Интенсивность массажа, 2 уровня (Intensity)
- (15) Вибрационный массаж сиденья (Seat Vibration)

#### Синхронизация музыки



- ① Синхронизация музыки Вкл/Выкл (Music Sync)
- ② Контейнер для хранения аудио источника
- ③ Аудио вход для источника музыки

Чтобы использовать функцию "Music Sync" Вам необходим, например, МР3-плеер.

С приложенным кабелем Вы можете подсоединить любое аудио устройство в разъем ③

После подсоединения важно включить кнопку »Music Sync« ①

Включите теперь Ваш МР3-плеер. Встроенная программа переносит музыкальный ритм на массаж. При этом Вы можете прослушивать музыку через встроенные динамики или через наушники.

